


ソーウォッシュ ハイドロジェット

2016-02

2007年8月13日

構成

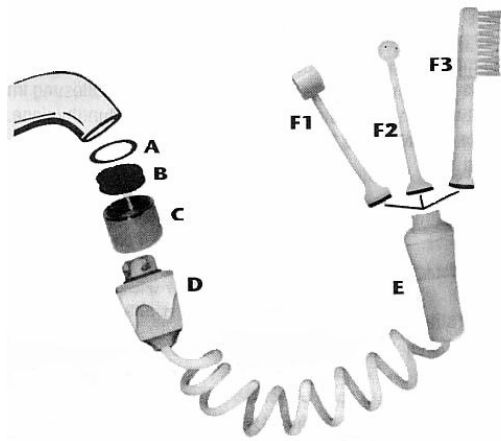

- A O-リング (パッキン)
- B フィルター用アダプター
- C フィルター
- D コネクター
- E ハンドル
- F2 ハイドロジェットヘッド

F 水流口ヘッド

セットにはハイドロジェットヘッド (F2) が入っています。

ハイドロパルサーヘッド (F1)、スぺアブラシ (F3) は別売りでお求めいただけます。

- F1 ハイドロパルサーヘッド …3つ穴タイプ 刺激に弱い方、広範囲の洗浄に
- F2 ハイドロジェットヘッド …1つ穴タイプ 細かい部分の食べかす、磨き残しを洗浄
- F3 スぺアブラシ …ハブラシの中央部から水流が出ます

蛇口タイプ

次のタイプのねじ込み式の蛇口にお使いいただけます。

次のタイプの蛇口にはお使いいただけません。



吐水口が凹タイプの場合



内径 24mm

吐水口が凸タイプの場合



外径 21mm



設置方法

- 1 水道蛇口の先のフィルター及び O-リング（パッキン）を取り外します。（図 1）



- 2 吐水口が凹タイプか凸タイプか確認します。

凹タイプの場合：

フィルター（C）、アダプター（B）、O-リング（パッキン）（A）をセットにし、蛇口にねじ込みます。（図 2）



凸タイプの場合：

フィルター（C）を蛇口にねじ込みます。

この時アダプター（B）と O-リング（パッキン）（A）は使用しません。（図 3）



- 3 ソーウォッシュ使用時は、コネクター（D）をフィルター（C）の溝に合わせ右に回してはめ込みます。（図 4）



- 4 ソーウォッシュ使用後は、コネクター（D）をフィルター（C）から外します。フィルター（C）は付けたままでも、通常の水道のご使用にさしつかえありません。

使用方法

- 1 ソーウォッシュを水道に設置します。

- 2 適当な水圧及び水温になるように水を出します。

※コネクター（D）には安全バルブが付いており、水圧が高すぎると自動的にバルブを開き、過剰な水を排出します。（右図）

※コネクター（D）の下からわずかに水が漏れる程度が適量です。水量が多すぎて多量の水が漏れる場合は水量を調節してください。



- 3 歯や歯ぐきに水流を当て、洗浄してください。

注 意

- お子様への使用は、大人の監視下で行ってください。
- 水流を目に向けないでください。
- 熱い湯で使用しないでください。水又はぬるま湯で使用してください。
- 使用中、 hidroジェットヘッド (F2)、スぺアブラシ (F3) あるいは hidroパルサーヘッド (F1) を歯で噛んだり傷つけたりしないでください。
- 定期的にフィルター (C) を洗浄してください。
- まっすぐな水流が出てこない場合は、ソーウォッシュを設置し直してください。
- 使用中は体などが濡れないようにご注意ください。
- スぺアブラシ (F3) 使用時は、ブラシで歯や歯ぐきを強くこする必要はありません。水流が洗浄します。

こんな時は・・・

- 蛇口とフィルター (C) の間から水が漏れる
→ ・フィルターを設置し直してください。力を入れすぎないように注意しつつ、フィルターを完全に蛇口にねじ込んでください。
- ハンドル (E) の下から水が漏れる。
→ ・ hidroジェットヘッド (F2)、スぺアブラシ (F3) あるいは hidroパルサーヘッド (F1) をハンドルにしっかりと装着してください。
→ ・ hidroジェットヘッド (F2)、スぺアブラシ (F3) あるいは hidroパルサーヘッド (F1) の装着部の中に黒いパッキンが入っていることを確認してください。

別売り品

hidroジェットヘッド
(2本入)



1つ穴タイプ。
細かい部分の食べかす
磨き残しを洗浄。

hidroパルサーヘッド



3つ穴タイプ。
刺激に弱い方、
広範囲の洗浄に。

スぺアブラシ
(2本入)



ハブラシとhidroジ
ェットが合体。
ハブラシの中央部から
水流が出ます。

フィルター&
スぺアダプター



ソーウォッシュを別の
蛇口で使用する時に。
O-リング付き。